



ボルヒール調製器セット (微量滴下セット スポイトタイプ) 包装変更のご案内

2024年1月

医療関係者 各位

〔供給元〕 KMバイオロジクス株式会社

一般社団法人

〔提供元〕 日本血液製剤機構

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ボルヒール®組織接着用の調製器セット(微量滴下セット スポイトタイプ)の包装を変更いたしますのでご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

(1) 中間箱・個包装袋の表示名

現行品

変更品

ボルヒール調製器セット
(微量滴下セット スポイトタイプ)



ボルヒール調製器セット
(微量滴下セット スポイトタイプ 27G×70mm)

規格を追記しました

(裏面に続く)

(2) 中間箱(10セット入り)



帯(ピンク)に製品名のみを記載



帯(ピンク)に製品名と規格を記載

(3) 個包装袋



製品名が印刷された個包装袋とラベル



無地の個包装袋と製品名等が記載されたラベル

(4) 使用方法説明書

現行品

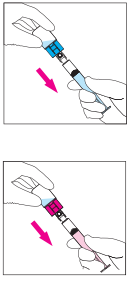
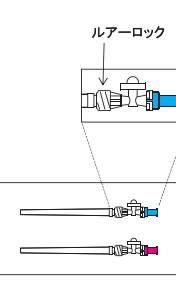
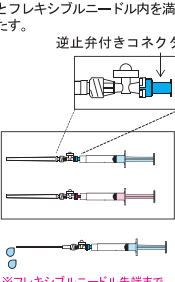
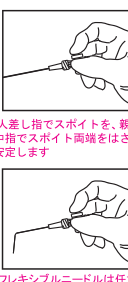
高度管理医療機器 薬液注入用ノズル

ボルヒール調製器セット 微量滴下セット スポイトタイプ使用方法説明書

【本機器は患部に微量の薬液を塗布できる器具です】

スポイト式のデバイスにフレキシブルニードルを接続し、薬液を滴下します。

【使用方法】

<p>STEP1 >>></p> <p>製剤バイアルから調製済みの薬液を抜き取っておく。</p> 	<p>STEP2 >>></p> <p>微量滴下デバイスのルアーロックにフレキシブルニードルを接続する。</p> <p>ルアーロック</p> 	<p>STEP3 >>></p> <p>微量滴下デバイスの逆止弁付きコネクタに薬液を充填したシリンジを接続し、薬液でデバイスとフレキシブルニードル内を満たす。</p> <p>逆止弁付きコネクタ</p>  <p>※フレキシブルニードル先端まで薬液を満たすことがポイントです</p>	<p>STEP4 >>></p> <p>微量滴下デバイスからシリンジを取り外し、指でスポイトを押す。</p>  <p>※人差し指でスポイトを、親指と中指でスポイト両端をはきむと安定します</p> <p>※フレキシブルニードルは任意の方向に曲げて使用できます</p>
--	--	---	---



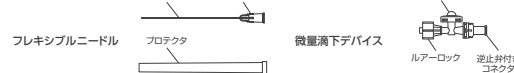
変更品

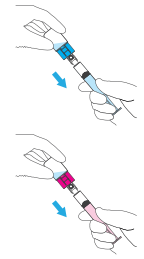
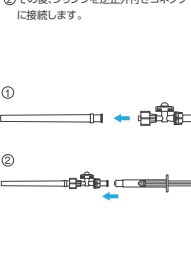
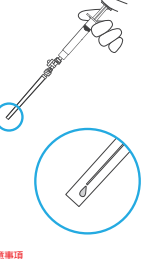
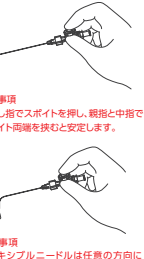
高度管理医療機器 薬液注入用ノズル

ボルヒール調製器セット (微量滴下セット スポイトタイプ)

使用方法説明書 27G×70mm・20G×95mm 共通

製品外観



<p>STEP 1 >>></p> <p>調製済みの薬液をシリンジに充填します。</p> 	<p>STEP 2 >>></p> <p>①微量滴下デバイスのルアーロックにフレキシブルニードルを接続します。</p> <p>②その後、シリンジを逆止弁付きコネクタに接続します。</p> 	<p>STEP 3 >>></p> <p>フレキシブルニードル先端まで薬液を満たしてください。</p>  <p>留意事項 シリンジを下向きにして充填します。</p>	<p>STEP 4 >>></p> <p>微量滴下デバイスからシリンジを取り外し、指でスポイトを押して、薬液を滴下します。</p>  <p>留意事項 人差し指でスポイトを押し、親指と中指でスポイト両端を挟むと安定します。</p> <p>留意事項 フレキシブルニードルは任意の方向に曲げて使用できます。</p>
--	---	--	---

その他の留意事項

- ① シリンジ内に気泡がある状態で微量滴下デバイスに薬液を充填した場合、気泡が微量滴下デバイス内に入り込み、スポイトを押しても薬液が出てくることがあります。
- ② フレキシブルニードルへの薬液充填後、乾燥すると目詰まりを起こすため、プロテクタは使用前に外してください。

2 変更品の製造番号、出荷予定時期

製品名	規格	製造番号	出荷予定時期	製造販売元
ボルヒール調製器セット (微量滴下セット スポイトタイプ)	27G×70mm	23J04	2024年2月	ニプロ株式会社

※ 流通在庫状況によって、変更品がお手元に届く時期が異なる場合があります。

お問い合わせ先

- KM バイオロジクス株式会社 くすり相談窓口 フリーダイヤル：0120-345-724
受付時間：月曜～金曜日 9:00～17:00（祝日・当社休業日を除く）
- 一般社団法人 日本血液製剤機構 くすり相談室 フリーダイヤル：0120-853-560
受付時間：月曜～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊機構休業日を除く）

供給元 **KMバイオロジクス株式会社**
熊本市北区大湊一丁目6番1号

提供元 **JB** 一般社団法人
日本血液製剤機構
東京都港区芝浦3-1-1